



Bei gedrückter Taste (Zusatzverstärkung) verdoppelt der Inline-Telefon-Hörverstärker PL-51 die eingestellte Lautstärke

When the amplification boost button is pressed, the PL-51 inline telephone amplifier doubles the volume setting.

Wählen Sie: Der batteriebetriebene, handliche Hörverstärker **PL-51** passt auch in Ihr Reisegepäck – oder bevorzugen Sie eher den standfesten **TA-2**? Ihr Hörgeräte-Akustiker berät Sie kompetent.

The choice is up to you: The battery-operated, easy-to-use **PL-51** telephone amplifier also fits right into your travelcase - or would you prefer the **TA-2** for stationary use? Your hearing-aid specialist will be happy to give you more information.

Sie benötigen kein neues Telefon, wenn Sie Ihre Gesprächspartner deutlicher verstehen möchten.

Einfach die Telefon-Hörverstärker **PL-51** oder **TA-2** zwischen Hörer und Telefonapparat anschließen, und Ihr normales Telefon wird zu einem Telefon, das leichte bis mittelgradige Hörverluste mühelos ausgleicht. Sie verstehen Ihre Gesprächspartner laut, klar und deutlich, so wie Sie es sich wünschen.

Die Inline-Telefon-Hörverstärker **PL-51** und **TA-2**:

- Anschließbar an alle zeitgemäßen stationären Telefonapparate mit Normsteckerverbindung zwischen Telefon und Hörer
- stufenlos einstellbare Lautverstärkung direkt zum Hörer

- Hoch-/Tiefonregulierung
- Betrieb mit Batterien (TA-2 auch mit Netzteil)
- Anschlussbuchse für Teleschlinge, Binaural-/ Monauralkabel, Kopfhörer
- Direktübertragung an Hörgeräte via Audioschuh
- Kombinierbar mit weiteren Zubehörsystemen, wie Infrarot-, Funk- oder Ringleitungsübertragungsanlagen

You don't need a new phone to improve your hearing on the telephone.

Simply connect the **PL-51** or **TA-2** telephone amplifier between the handset and the base unit of your corded telephone, your phone can then compensate for your mild to medium hearing loss. You will hear people with the clarity and volume you need.

Common PL-51/TA-2 features:

- Can be used with most modern telephones with standard plug in connectors between the handset and base station
- Stepless control of the volume coming from the receiver
- Tone control
- Battery operated (the TA-2 also has a mains adapter)
- Separate output; can be used with neck loop, headphones, monaural/ binaural leads
- Direct connection to hearing aid with lead
- Can be combined with other accessory systems e.g. IR, Radio and Room Loop systems

Sonderzubehör
Special accessories:




Technische Daten / technical data	PL-51 (A-4506-0)	TA-2 (A-4512-0)
Abmessungen (mm) / Dimensions (mm):	H/h: 40 x B/w: 70 x T/d: 105	H/h: 52 x B/w: 115 x T/d: 157
Farbe / Color:	silber / silver	weiß/hellgrau - white/pale gray
Gewicht / Weight:	122 g	253 g
Hörverstärkung: / Hearing amplification:	35 dB	35 dB
Stromversorgung: / Power supply:	2 x 1.5 V Batterien / batteries	230 V (Netzgerät) / 230 V (mains adapter) oder / or 4 x 1.5 V Batterien / batteries

Sonderzubehör / Special accessories:

- 1 (A-4921-0) **Teleschlinge** für induktive Übertragung an HdO-Hörgeräte / **Neck loop** for inductive transmission to behind-the-ear hearing aids
- 2 (A-4940-0) **Monaurales Kabel** zum Anschluss an Hörgeräte / **Monaural cable** for connecting to hearing aids
- 3 (A-4950-0) **Binaurales Kabel** zum Anschluss an Hörgeräte / **Binaural cable** for connecting to hearing aids
- 4 (A-4903-0) **Kinnbügelhörer** mit ergonomisch gestalteter Ohr-Passform (schmiegt sich in den Gehörgang) / **Stethoscope headset** with ergonomically formed ear pieces (fit into the auditory canal)
- 5 (A-4902-0) federleichter **Kinnbügelhörer** / **exceptionally light stethoscope headset**
- 6 (A-4905-0) **Klassischer Kopfhörer** / **Classic headset**
- 7 (A-4904-0) **Dezenter Ohrhörer** / **Discreet ear pieces**

HUMANTECHNIK

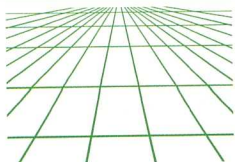

HUMANTECHNIK GmbH
Im Wörth 25 · D-79576 Weil am Rhein
Telefon: +49 (0) 7621 / 9 56 89 - 0
Fax: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 70
Internet: www.humantechnik.com
E-Mail: info@humantechnik.com

Ihr Hörgeräte-Akustiker berät Sie umfassend und kompetent
Consult your hearing-aid acoustician for detailed information